

1. Produktname

Beleuchtetes Ballbecken 200 x 200 x 45 cm

2. Produktcode

24106008

3. Farbe

Farbe Ihrer Wahl




4. Beschreibung

Ein beleuchtetes Bällebad, das für jede Zielgruppe geeignet ist. Entspannen Sie sich in diesem beleuchteten Bällebad. Das Bällebad ist einfach zu installieren.

HINWEIS: Die Bälle für das Bällebad sind nicht enthalten.

5. Inbetriebnahme

1. Packen Sie die 2 Pakete vorsichtig aus und trennen Sie alle Blöcke wie unten gezeigt.
2. Blöcke platzieren 1 & 2 (mit Lichtbalken) voreinander und Platzblöcke 3 & 4 beidseitig nach Unter Skizzieren.

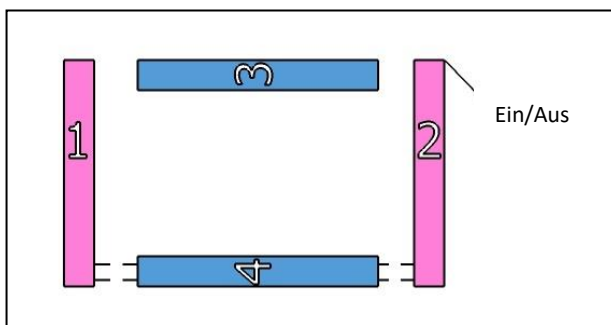


3. Verbinden Sie die 2 Kabel von Block 4 mit denen von Block 1 und verbinden Sie auf die gleiche Weise die 2 Kabel von Block 4 mit denen von Block 2.
4. Sobald die Kabel angeschlossen sind, halten Sie die Kabel in den Blöcken 1 und 2 und fahren Sie fort, die 4 Blöcke mit dem Velcro System zuverbinden. Sie verbinden auch die Blöcke mit der Basis.
5. Der letzte Schritt besteht darin, das Netzkabel von Block 2 an den Schaltschrank anzuschließen und den Schrank an das Stromnetz anzuschließen (220V bis 100 Volt).
6. Schalten Sie das Bällebad "ein" und genießen Sie das Produkt!

6. Sinne-Stimulation

Sehen, fühlen, propriozeptiv



7. Fernbedienungsfunktionen

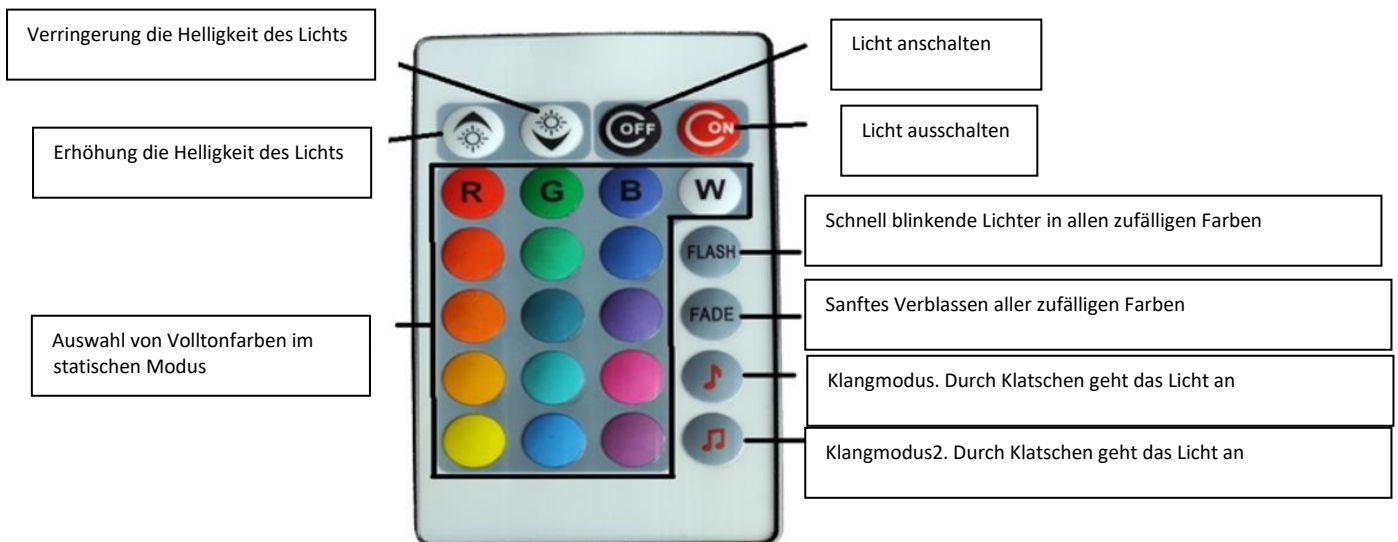

8. Leistungsbeschreibung

1. Mit Bisonylbeschichtung in der Farbe Ihrer Wahl; die 1. Farbe ist die lange Seite und die 2. Farbe ist die kurze Seite.
2. Dieses Bällebad besteht aus Schaumstoffblöcken, die mit einem Velcro-System verbunden sind.
3. Zwei Blöcke haben ein Fenster auf der Innenseite mit einer Lichtleiste, die das gesamte Bällebad beleuchtet.





4. Dieses Licht verändert die Farbe, indem es Bewegung und Geräusche macht, zum Beispiel Klatschen.
5. Um den Effekt zu verbessern, wird empfohlen, das Bällebad mit transparenten Bällen zu füllen (Bälle sind nicht im Lieferumfang enthalten).
6. Sobald das Bällebad angeschlossen ist, können Sie 2 Modi wählen:
 - a. Modus 1: Festes Licht, Sie können die Farbe selbst wählen.
 - b. Modus 2: Lichtwechsel, lassen Sie das Licht auf Ton ändern. Tun Sie dies zum Beispiel durch Klatschen.

9. Einschließlich

1 x Beleuchtetes Bällebad (4 Blocks)

1x Fernbedienung

1x Empfänger

10. Technische Informationen

Abmessungen: 200x2000x45cm

Gewicht: 22 Kg

Material: PVC Polyester und Polyurethan Schaum 25 kg/m³

LED: nicht austauschbare LEDs

Adapter: Eingang: 100 – 240V – 50Hz / Ausgang: 12Vac – 750mA 9.0VA